


# Mento multifunktionales Massagegerät

## 1. Bezeichnung der Komponenten

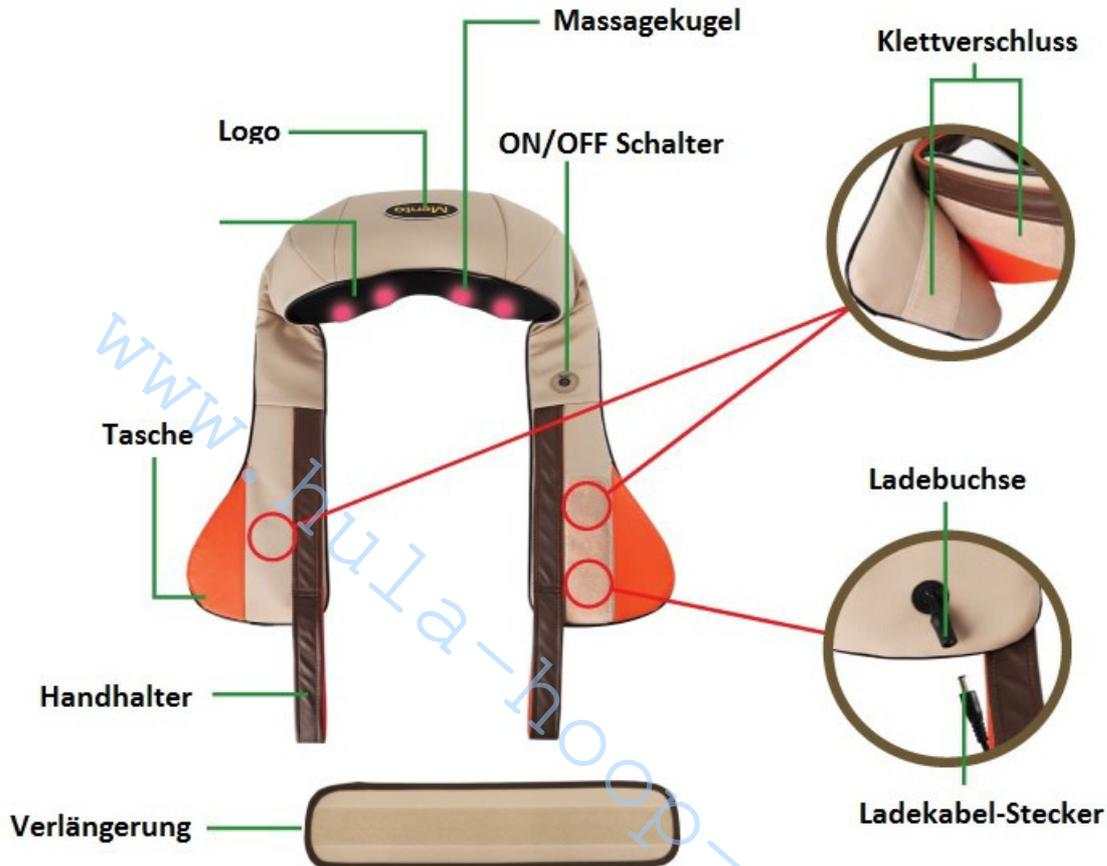

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig und vollständig durch. Sowohl Hersteller als auch Händler sind nicht verantwortlich, wenn Sie als Verbraucher die Hinweise nicht beachten. Dieses Massagegerät ist nicht für Kinder geeignet, genauso wenig für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungswerten, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder beim Gebrauch des Geräts durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt.

## 2. Warnhinweise:

Falls Sie die Hinweise nicht beachten, so kann dies mitunter gesundheitliche Folgen haben.

- Benutzen Sie NUR den Standard-Adapter von Mento, um jedes Gesundheitsrisiko zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Massagegerät nicht, falls irgendein elektrisches Bauteil (Kabel, Stecker etc.) defekt ist.
- Berühren Sie weder das Massagegerät noch den Stecker mit nassen Händen.
- Brechen Sie den Stecker nicht auf.
- Schließen Sie nicht alle Stecker zur gleichen Zeit an einer Steckdose an.
- Ändern oder erweitern Sie niemals das Kabel oder den Stecker (dies kann einen Brand verursachen).
- Das Massagegerät darf nicht in einer nassen Umgebung oder während eines Gewitters benutzt werden (dies kann Fehler oder einen Kurzschluss verursachen).
- Fügen Sie dem Massagegerät keine groben äußeren Einwirkungen zu
- Halten Sie das Produkt entfernt von Gasquellen und Elektronik (Schnellkochtopf, Heizung etc.) und niemals in der Nähe von entflammaren Produkten (Heizung, Induktionsherd)
- Setzen Sie das Produkt keinem hohen Druck aus.

- Halten Sie das Massagegerät fern von elektrischen Geräten (siehe Warnhinweis oben), da die Batterie sich so verflüssigen könnte, was eine potenzielle Brandquelle darstellt).
- Stecken Sie das Gerät niemals in den Mund, da sonst eine erhöhte Verletzungsgefahr besteht.
- Zerschlagen Sie das Gerät nicht.
- Setzen Sie es keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Dadurch könnte es brechen und die Batterie defekt werden.
- Benutzen Sie keine beschädigten Batterien, laden Sie diese nicht mehr auf!
- Erlauben Sie es Kindern und Haustieren nicht, in die Nähe des Gerätes zu kommen.
- Wenn das Produkt defekt ist, kann es zu Feuer oder Bersten führen.
- Manche Komponenten können eine Erstickungsgefahr auslösen. Daher sollten Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

#### **In diesen Situationen sollten Sie das Gerät nicht mehr benutzen**

- in Kombination mit Schrittmachern und anderen medizinischen Geräten (Herzschrittmacher)
- schwangere Frauen und junge Kinder
- für Kinder ist der Gebrauch generell verboten

#### **Fragen Sie Ihren Arzt vor der Benutzung des Massagegerätes, wenn Folgendes auf Sie zutrifft:**

- bösartige Tumor- und Herzerkrankungen
- schwangere Frauen, akute Monatsblutung
- medizinische Krankheitsbilder
- Störungen im Blutkreislauf
- psychische Erkrankungen
- allgemeines Krankheits- und Schwächegefühl

### **3. Bitte Folgendes beim Gebrauch unbedingt beachten**

- Reinigen Sie die Massagefläche regelmäßig
- sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, entfernen Sie bitte den Adapter
- im aufgeladenen Zustand können Sie das Gerät ca. 3 Stunden nutzen (allerdings sollten Sie diese Zeit nicht an einem Stück nutzen)
- Bitte lassen Sie das Gerät nach einer 30 minütigen Anwendung für 15 Minuten ruhen
- Nutzen Sie das Gerät nicht binnen 1 Stunde nach dem Essen, um negative Effekte zu vermeiden
- Sobald Sie Anomalitäten feststellen/spüren (z.B. Geruch etc.), stoppen Sie die Nutzung und wenden Sie sich bitte an den Kundenservice
- die Aufladezeit beträgt 3 Stunden (Adapter 12.6 V, 1.5 A)
- bauen Sie das Produkt niemals selber auseinander, um es zu reparieren. Zudem erlischt so die Gewährleistungsfrist.
- Nutzen Sie das Gerät nicht ohne Check, wenn Sie es über einen längeren Zeitraum nicht mehr benutzt haben.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Adapter und den Batteriezustand.
- Überladung kann die Lebensdauer der Batterie negativ beeinflussen.
- Ziehen Sie das Ladekabel nach erfolgter Aufladung bitte heraus.
- Verwenden Sie die Lionen-Batterien bitte keinesfalls für andere Zwecke.
- Für Ihren Garantieanspruch ist es wichtig, dass Sie alle Verwendungshinweise beachten, um Ihre Ansprüche beim Kundenservice geltend zu machen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht weiter, falls Sie eine Überhitzung feststellen.
- Bitte beachten Sie bezüglich des Körperkontaktes, dass sich das Gerät aufheizt: Geben Sie Acht, falls Sie sehr empfindlich auf diese Wärme reagieren und treffen Sie ggf. Vorsichtsmaßnahmen

### **4. Anwendungsmethoden: Wie ist das Gerät zu benutzen?**

1. Schließen Sie den Adapter an (12.6Vdc, 1.5 A)
2. Verbinden Sie Buchse und Stecker (AC 220 V)
3. Laden Sie das Gerät für 2,5 Stunden auf (eine grüne Leuchte zeigt Ihnen die vollständige Aufladung an).
4. Ziehen Sie nach vollständiger Aufladung den Stecker.
5. Das Gerät kann für viele Körperregionen wohltuend eingesetzt werden:
  - 1) Sie können es für den Bauch, die Taille, den Hals und die Schulter verwenden
  - 2) Bitte verwenden Sie den Handhalter und die Taschen für eine Massage
6. Drücken Sie für 2 Sekunden auf ON/OFF, schon schaltet sich der Massager ein.
7. Drücken Sie den ON/OFF Schalter für 1 Sekunde, um die Wärmefunktion zu aktivieren. Durch nochmaliges Drücken wird diese Funktion wieder abgeschaltet.
8. Die Anwendungsdauer sollte 15 Minuten betragen. Bitte lassen Sie die Maschine für 15 Minuten aus, wenn Sie sie 30 Minuten benutzt haben.
9. Falls die Temperatur bei der Benutzung über 50 Grad steigt, so wird das integrierte Thermostat zu einer Abschaltung führen. Auch der Motor stoppt in diesem Fall automatisch.

## 5. Reinigungshinweise

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem trockenen Tuch.

Verwenden Sie spezielle Reinigungsmittel für Kunstleder mit einem trockenen und weichen Tuch.

Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel wie Benzol für die Reinigung

## 6. Produktspezifikationen:

Modellname: elektronisches Massagegerät MT-55A

Marke: Mento

Farbe: beige, braun, orange

Produktgröße: 650\*630\*150 (mm)

Nettogewicht: 1.8 kg

Nennleistung: 24 Watt Arbeitszeit: 15 min

Li-ion Batterie: 11.1Vdc mit 1800 mAh

Ladezeit: bis zu 3 Stunden / Benutzungsdauer: 1-3 Stunden

Material: PU

Produktzusammensetzung: Massagegerät, Adapter, Anleitung

### Adapter:

- Bezeichnung: Electric DC Komponente
- Modell: SW19-12601500-EK
- Nennspannung: 100~240 V, 50/60HZ, 1.5 A
- Nennspannung: 12.6Vdc, 1.5 A

## 7. Importeur:

Lux-In GmbH  
Großmehring Str. 5  
85092 Kösching  
Germany

Email: [sales@lux-in.de](mailto:sales@lux-in.de)

Tel.: +498411218388

# Gebrauchsanweisung

# **Mento – multifunktionales Massagegerät**



Art.Nr.: MT-55A